



AKSESUARLAR

- OKSİJEN FLOWMETRESİ
- VAKUM REGÜLATÖRÜ
- VAKUM KAVANOZU
- AKSESUAR SEPETİ
- ABONE FİŞLERİ
- MONİTÖR SEHPASI
- SERUM ASKISI
- CİHAZ ASKI RAYI



MEDIKAR

www.medikar.com

info@medikar.com

OKSİJEN FLOWMETRESİ

Ürün Özellikleri

- Merkezi sistemden gelen oksijen gazının debisinin ayarlanıp nemlendirerek hastaya verilmesini sağlamak amacı ile tıbbi uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
- Oksijen Flowmetresi (debimetresi) oksijenin burun memesi ve maske aracılığı ile nemlendiriciden geçerek hastaya verilir.
- Oksijen ile kullanılır.
- Skala göstergesi kırılmaya karşı dirençli polikarbon malzemeden yapılmıştır.
- Otoklavda steril edilebilir.
- Scala göstergesi 1-15 lpm aralığında bölüntülüdür.
- Flowmetre gövdesi oksijenle kullanım için en hijyenik olan krom kaplı pirinç malzemeden imal edilmiştir.
- Nemlendirme şişesi 150°C'ye kadar steril edilebilmektedir.
- Nemlendirme şişesi 200ml'dir.

Uygulanan Standartlar

MEDIKAR Flowmetreleri, uygun Gaz Prizlerine direk olarak

- EN (Avrupa),
- BS 5682:1998 (İngiliz),
- DIN 13260-2 (Alman),
- NF-S90-116 (Fransız),
- Amerikan, İtalyan veya diğer abone fişleri ile bağlanabilirler.



Oksijen Flowmetresi

Ürün Kodu	Ürün Adı
10-130-100	Oksijen Flowmetresi-BS
10-130-200	Oksijen Flowmetresi-DIN
10-130-300	Oksijen Flowmetresi-EN
10-130-400	Oksijen Flowmetresi-NFS



TEKNİK BİLGİ

Flowmeter

Giriş Basıncı	58 psi (4 bar)
Çalışma Aralığı	1 to 15 lpm
Sterilizasyon	150°C
Akış oranı doğruluğu: 4 bar (2-14lpm)	± 0,1 - 0,5 %
Kullanılan Gaz	Oxygen
Boyut	11.8x4.3 in (300 x110)
Madde	Gövde Piring Nemlendirme şişesi Polikarbon Akış Göstergesi Polikarbon
Ağırlık	Nemlendirme şişesi 0,3 lb (143gr) Akış göstergesi(abone fişli) 0,5 lb (235gr)
Standards	EN, BS,DIN, NF-S, Amerikan,İtalyan veya diğer abone fişleri ile gaz prizlerine bağlanabilirler.

VAKUM REGÜLATÖRÜ

Ürün Özellikleri

- Ayarlanabilir vakum seviyesi sayesinde hastaya gereken ölçüdeki vakumu sağlar.
- Üzerinde ayarlanan basınç değerini görsel olarak görebilmek için manometre bulunur.
- Vakum Regülatörleri endotrakeal özellikte olup 0-760 mmHg aralığında vakumu regüle edebilir.
- Regülatör gövdesi prinç malzemeden üzeri krom kaplama olarak imal edilmektedir.
- Regülatör üzerinde bulunan ayar kapağı aracılığı ile vakum seviyesi ayarlanabilmektedir.
- Acil durumda hastaya giden vakum seviyesini değiştirilmeden on/off kilit sistemi ile vakum regülatörü kapatlabilmektedir.
- Üzerinde vakum kavanozundan gelen hortuma uygun hortum çıkış ucu bulunmaktadır.
- Vakum regülatörü ergonomiktir; vakum prizine tek elle takılıp sökülebilir özellikte dizayn edilmiştir.



Uygulanan Standartlar

MEDIKAR Vakum regülatörleri, uygun Gaz Prizlerine direk olarak

- EN (Avrupa),
- BS 5682:1998 (İngiliz),
- DIN 13260-2 (Alman),
- NF-S 90-116 (Fransız),
- Amerikan, İtalyan veya diğer abone fişleri ile bağlanabilirler.



Vakum Regülatörü

Ürün Kodu	Ürün Adı
50-142-000	Vakum Regülatörü - BS
50-142-100	Vakum Regülatörü-DIN
50-142-200	Vakum Regülatörü-EN
50-142-300	Vakum Regülatörü-NFS



TEKNİK BİLGİ

Medikal Vakum Regülatörü

Çalışma Aralığı	0 - 760 mmHg (0 - 100 kPa)
Ölçüm	Analog
Madde	Gövde : Prinç
Abone fişi	Vakum
Boyut	5,4x 5,9 in (140x150 mm)
Standartlar	EN, BS,DIN, NF-S, Amerikan,İtalyan veya diğer abone fişleri ile gaz prizlerine bağlanabilirler.

VAKUM KAVANOZU

Ürün Özellikleri

- Hijyenik malzemeden plastik enjeksiyon yolu ile imal edilmiştir.
- Otoklavda 120°C'ye kadar steril edilebilir.
- Üzerinde bulunan taşma vanası sayesinde dolduğu zaman otomatik olarak kapanır.
- Vakum Kavanozu 0,5 lt, 0,75 lt ve 2lt kapasite çeşitleri mevcuttur.
- Kolay açılıp kapanabilen kapak sistemine sahiptir.
- Duvara, raya veya direk vakum regülatörüne montaj edilebilir özellikte çeşitleri vardır.



Vakum Kavanozu

Ürün Kodu	Ürün Adı
99-754-001	Vakum Kavanozu - 0,5lt
99-754-003	Vakum Kavanozu - 0,75lt
99-754-006	Vakum Kavanozu - 2lt



ABONE FİŞLERİ

Ürün Özellikleri

- Abone Fişleri; belirli bir medikal gazı aynı anda gaz prizinden bir cihaza veya hastaya basınçlı hortumlar aracılığı ile sağlamaya yarar.
- Kullanılacağı gaza göre çeşitleri vardır. Pirinç malzemeden imal edilmiş olup krom kaplıdır veya paslanmaz çelik malzemeden imal edilmektedir.
- BS 5682, DIN 13260, NFS 90-116, EN 737, İtalyan ve Amerikan standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.



Ürün Kodu

99-950-007-14

Ürün Adı

Abone Fişleri

MANOMETRELİ
ABONE FİŞLERİ


Ürün Özellikleri

- Manometreli Abone fişleri; Medikal gaz prizleri ile tıbbi cihazlar arasındaki bağlantıyı sağlamak amaçlı kullanılan uç birimlerdir.
- Üzerindeki basınç değerini görsel olarak görebilmek için manometre bulunur.
- Basınç göstergelerinde ölçüm aralıkları 0-16 bar'dır.
- Kullanılacağı gaza göre çeşitleri vardır. Pirinç malzemeden imal edilmiş olup krom kaplıdır.
- BS 5682, DIN 13260, NFS 90-116, EN 737, İtalyan ve Amerikan standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.

AKSESUAR SEPETİ

Ürün Özellikleri

- Çelik örgülü telden imal edilmektedir.
- Yoğun bakım ünitelerinde kullanılır ve ray üzerine monte edilir.
- Aşağı yukarı hareket edebilme özelliğine sahiptir.
- RAL 9016 elektrostatik toz boya ile boyanır.
- İstenildiğinde paslanmaz çelik olarakta üretilir.

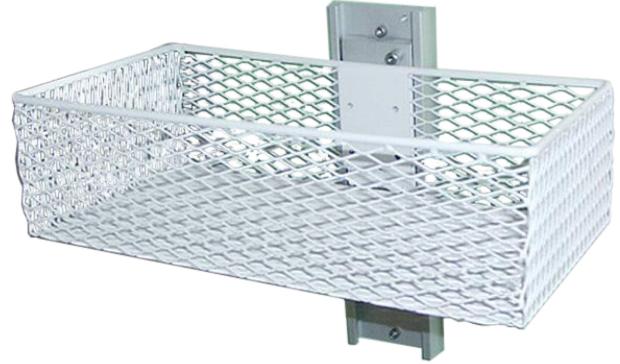

Ürün Kodu

90-811-000

Ürün Adı

Aksesuar Sepeti



MONİTÖR SEHPASI

Ürün Özellikleri

- Özel extrude alüminyumdan çekilmiş olup eloksallıdır. Min 90 kg taşıyabilme özelliğine sahiptir.
- Cihaz askı rayına veya duvara monte edilebilir. Raya bağlantılı olursa raya bağlantı takozu ilave edilir.
- Monitör sehpası gövdesi ray üzerinde aşağı yukarı hareket edebilmektedir.
- Monitör tablası ayar flanşı ile öne arkaya ayarlanabilir.

Ürün Kodu

90-805-000

90-806-000

Ürün Adı

Monitör Sehpası-Duvara Monte

Monitör Sehpası-Raya Monte

SERUM ASKISI

Ürün Özellikleri

- Serum askısı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.
- Serum askısının boyu kullanılacağı üniteye göre değişmektedir.
- Hasta yatakbaşı üniteleri, Yoğun bakım üniteleri üzerinde kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı
90-803-300	Serum Askısı-Raya Monte
90-803-400	Serum Askısı-Yatağa Monte



Ürün Kodu	Ürün Adı
90-808-000	Cihaz Askı Rayı

CİHAZ ASKI RAYI

Ürün Özellikleri

- Cihaz askı rayı extrude alüminyumdan imal edilmiştir.
- Üzerine isteğe bağlı olarak ekipman takılabilmesi için duvara veya ünite üzerine monte edilen aksesuarlardır.
- Boyu kullanılacağı yere göre değişmektedir.



MEDİKAR HASTANE VE TIBBİ SİSTEMLER YAPI TAAHHÜT TESİSAT İMALAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Ofis: Varlık Mah. Beypazarı Cad. No:21/3 Yenimahalle/ANKARA Tel: +90 (312) 341 10 41 Fax: +90 (312) 341 10 42
Fabrika: Mersin Tarsus OSB Cumhuriyet Bulvarı No:13 Akdeniz /MERSİN Tel: +90 (324) 645 40 41 Fax: +90 (324) 645 40 42



info@medikar.com



www.medikar.com