

PENDANTLAR

MEDİKAL AMELİYATHANE PENDANTLARI

Sabit, Hareketli ve Motorlu Kollu Pendantlar

Anestezi Tip, Genel Cerrahi Tip, Genel Tip Pendantlar



MEDIKAR

www.medikar.com

info@medikar.com

MEDİKAL PENDANTLAR

Anestezi Tip Pendant *Genel Cerrahi Tip Pendant* *Genel Tip Pendant*

Genel Tanım

Ameliyathane pendantları; ameliyathanelerde ve doğum salonlarında anestezi ve cerrahi amaçlar için ihtiyaç duyulan tüm gerekli servisleri ve cihaz bağlantılarını sağlamak için tavandan ameliyathane masası yanına getiren sistemdir. Pendantlar beyaz epoksi elektrostatik toz boyalıdır. Güvenlik ve hijyen bakımından avantajları büyüktür. Tek ve çift kol tertibatlı, hareketli ve statik oluşuyla ekipmanlar uygulanılacak noktaya en kolay şekilde ulaştırılır. Departmanın içerisinde hareketi kısıtlayan kablo ve bağlantılar yoktur. Kullanımı kolaydır.



Pendant kol, konsol, monitör sehpa ve raflardan oluşmaktadır. Raflar ve çekmeceler isteğe göre ilâve edilmektedir.

Konsol boyları istenilen raf sayısına göre değişmektedir. Konsol üzerine isteğe bağlı olarak basınç göstergesi konulabilmektedir. Basınç göstergeleri sayesinde pendantın üzerinde bulunan gazların basınçları veya vakum değerleri görülebilmektedir. Pendantların standart güç gereksinimleri 220V'tur. Tek fazda 50Hz'dir. Bunların dışında ki voltajlar isteğe bağlı olarak elde edilebilir. Üzerinde medikal gaz, elektrik servisleri ve monitör sehpa mevcuttur.



ACP-90

DÖNER TABLALI
SABİT KOLLU PENDANT



HSP-90

YATAY TEK KOLLU PENDANT



HTP-90

YATAY ÇİFT KOLLU PENDANT

PENDANT MODELLERİ

MSP-90

MOTORLU TEK KOLLU
PENDANT



MTP-90

MOTORLU ÇİFT KOLLU
PENDANT



DAP-90

ÇİFT KOLLU AMELİYATHANE
PENDANTİ





ACP-90

DÖNER TABLALI
SABİT KOLLU PENDANT

Ürün Özellikleri

- Döner tablalı ve sabit kollu ameliyathane pendantı tavana montelidir.
- Sabit kol, konsol ve monitör sehpasından oluşmaktadır.
- Konsol üzerinde medikal gaz prizleri, AGSS, elektrik servisleri, topraklama nodu, isteğe bağlı basınç göstergeleri bulunmaktadır.
- Tek, çift ve 3 raflı çeşitleri vardır.
- Çekmece opsiyoneldir.
- Konsol max. 90 kg yük taşıyabilme özelliğine sahiptir.
- Konsol 340° dönebilmektedir.
- Pendantların alt seviyesinin yerden yüksekliği 1,2 m olacak şekilde monte edilmektedir.



Uygulanan Standartlar

- MDD 93/42/EEC EK-2, ISO 9001:2015, ISO 13485, ISO 14971, EN 15223-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN ISO 11197, EN 1041, EN 62366-1, HTM 02-01 standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün Modelleri


Tüketicinin talebine göre istenilen özelliklerde üretilmektedir.






HTP 90 Pendant	
Model	Özellik
90-307-102	Tek Sehpa
90-307-103	Tek Sehpa+ Çekmece
90-307-202	Çift Sehpa
90-307-203	Çift Sehpa + Çekmece

Ürün Renkleri

Tüketicinin talebine göre istenilen renklerde üretilmektedir.

	RAL 7035		RAL 7001
	RAL 3002		RAL 3014
	RAL 6019		RAL 9001
	RAL 5017		RAL 5018
	RAL 5024		Opsiyonel

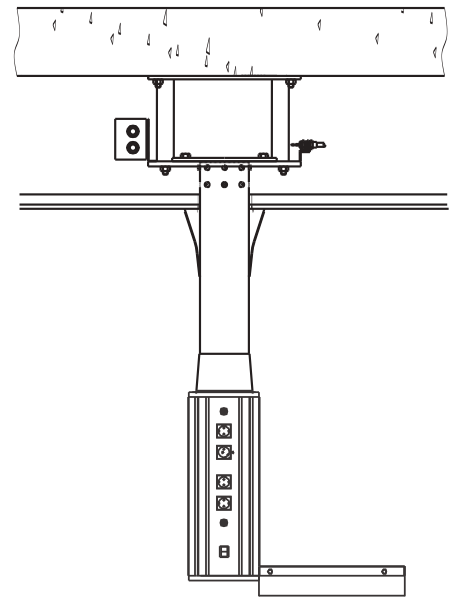

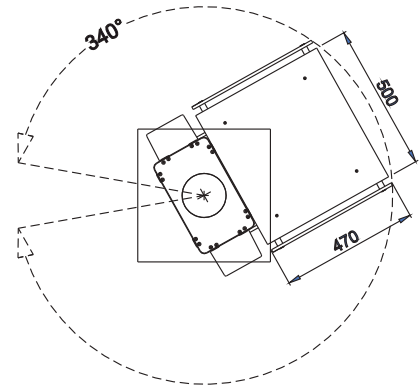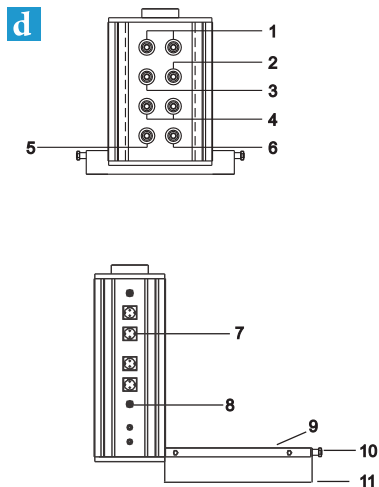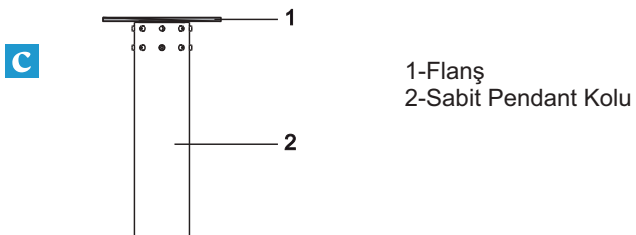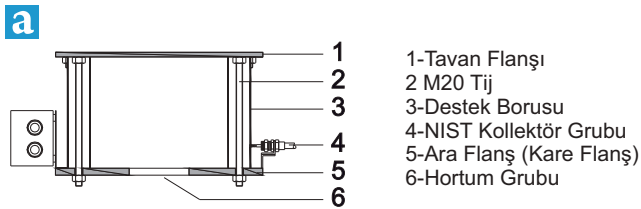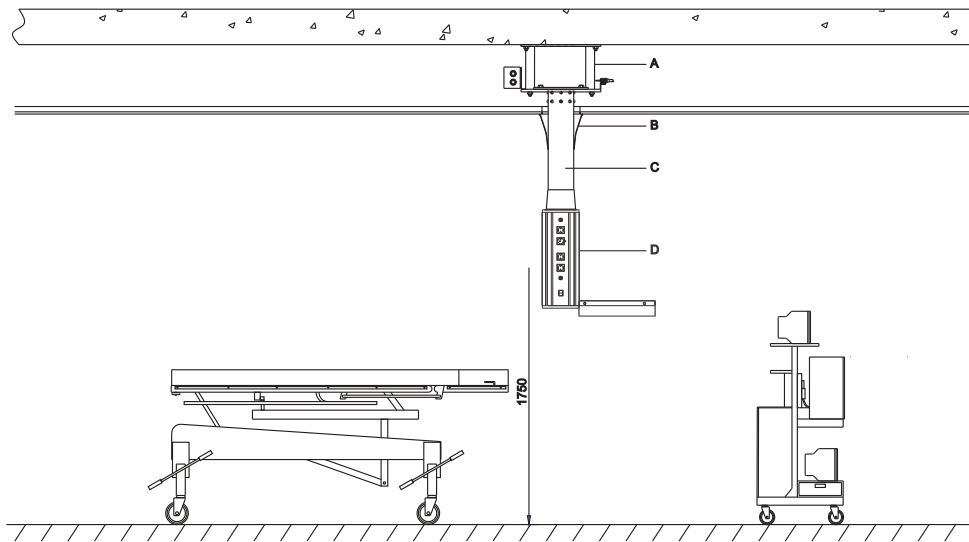

d. Konsol

NO	Ürün kodu	Ürün adı	Adet
1	10-010-020	Q-Click Oksijen Gaz Prizi	2 ad.
2	30-010-020	Q-Click Medikal Hava 4 Gaz Prizi	1 ad
3	40-010-020	Q-Click Medikal Hava 7 Gaz Prizi	1 ad.
4	50-010-020	Q-Click Vakum Gaz Prizi	2 ad
5	20-10-020	Q-Click Azot Protoksit Gaz Prizi	1 ad.
6	60-013-000	Agss Gaz Prizi	1 ad.
7	99-515-001	Topraklı Elektrik Prizi	8 ad
8	90-804-000	Topraklama nodu	8 ad
9	90-300-510	Pendant Sehpası	1 ad.
10	90-300-535	Paslanmaz Çelik rayı	2 ad.
11	90-300-101	Cekmece	1 ad.



HSP-90

YATAY TEK KOLLU PENDANT


Ürün Özellikleri

- HSP 90 Pendantları; ameliyathanelerde, yoğun bakımlarda ve doğum salonlarında anestezi ve cerrahi amaçlar için ihtiyaç duyulan tüm gerekli servisleri ve cihaz bağlantılarını tavandan sağlayan bir sistemdir.
- Pendantlar beyaz epoksi elektrostatik toz boyalıdır.
- Departmanın içerisinde hareketi kısıtlayan kablo ve bağlantılar yoktur.
- HSP 90 tipi pendantta yatay kol ve konsoldan oluşmaktadır. Proje durumuna göre pendant kol ölçüleri değişiklik gösterebilmektedir.
- Pendant kolu sabittir. Aşağı- yukarı hareket etmez.

- Tek, çift ve üç raflı konsol çeşitleri vardır.
- Çekmece opsiyoneldir.
- Konsol üzerinde bulunan monitör sehpası max. 250 kg. yük taşıyabilme özelliğine sahiptir.
- Konsol kendi ekseninde 340° dönebilir.
- Konsol üzerinde Medikal Gaz Prizleri, AGSS elektrik servisleri, topraklama nodu bulunmaktadır.

Uygulanan Standartlar

- MDD 93/42/EEC, EN ISO 14971:2010, ISO 13485:2016, EN 793, EN 15223-1:2016, EN 940:2012, ve HTM 02-01 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretimi yapılmıştır.

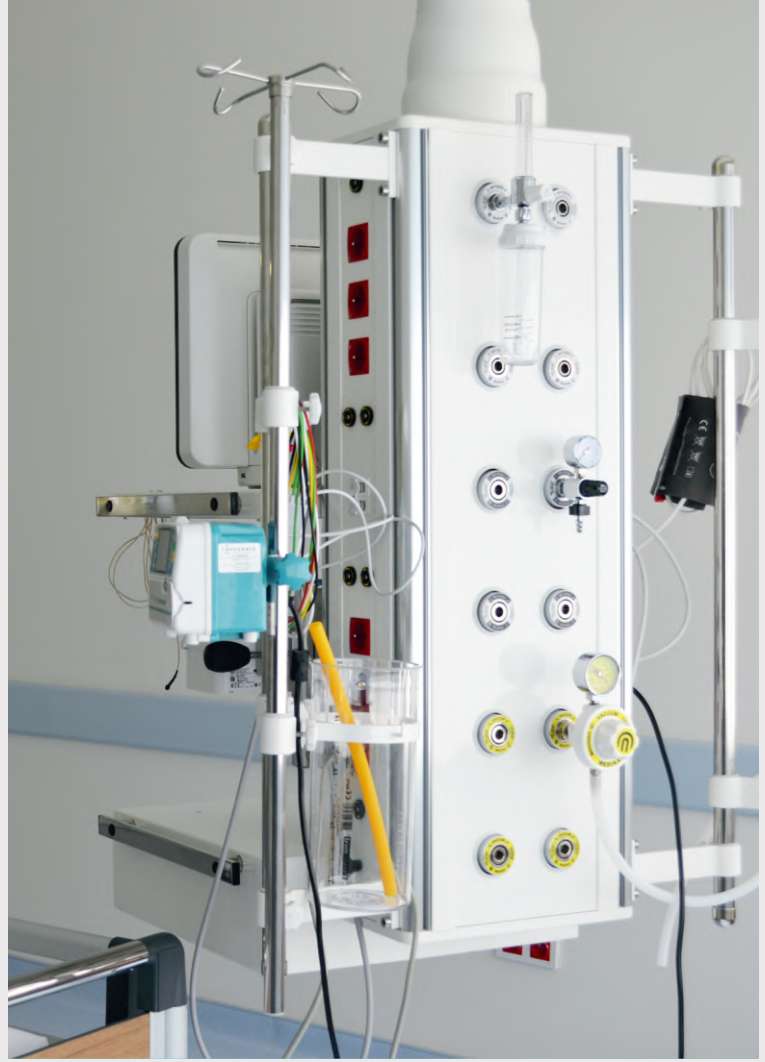

Ürün Modelleri

Tüketicinin talebine göre istenilen özelliklerde üretilmektedir.


HSP 90 Pendant	
Model	Özellik
90-302-102	Tek Sehpa
90-302-103	Tek Sehpa+ Çekmece
90-302-202	Çift Sehpa
90-302-203	Çift Sehpa + Çekmece

Ürün Renkleri


Tüketicinin talebine göre istenilen renklerde üretilmektedir.

	RAL 7035		RAL 7001
	RAL 3002		RAL 3014
	RAL 6019		RAL 9001
	RAL 5017		RAL 5018
	RAL 5024		Opsiyonel



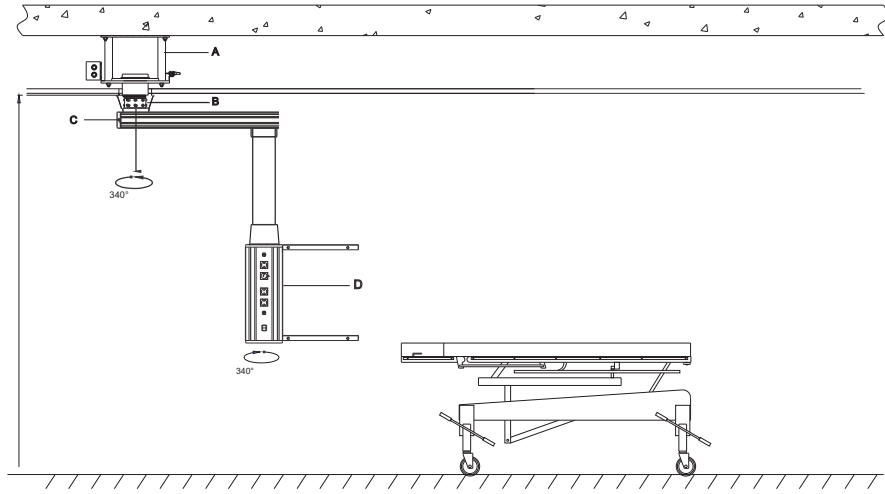

a

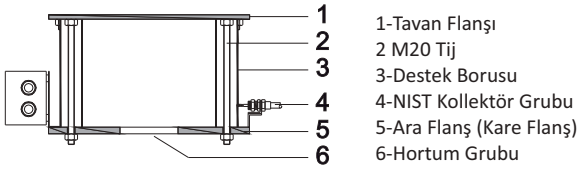


b




1-Flanş Kapağı

c

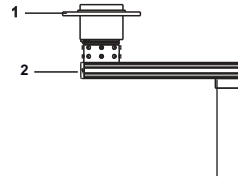
1-Flanş
2-Yatay Tekli Pendant Kolu

d

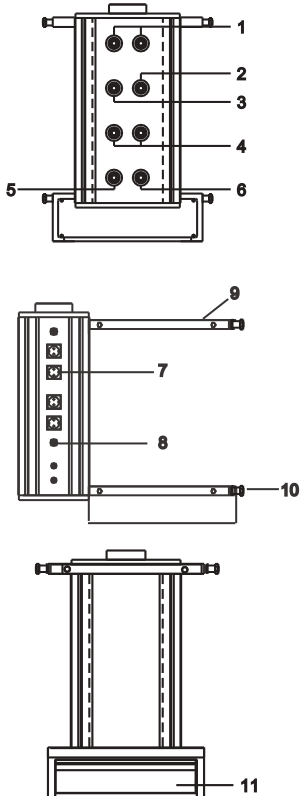

d. Konsol

No	Ürün kodu	Ürün adı	Adet
1	10-010-020	Q-Click Oksijen Gaz Prizi	2 ad.
2	30-010-020	Q-Click Medikal Hava 4 Gaz Prizi	1 ad.
3	40-010-020	Q-Click Medikal Hava 7 Gaz Prizi	1 ad.
4	50-010-020	Q-Click Vakum Gaz Prizi	2 ad.
5	20-010-020	Q-Click Azot Protoksit Gaz Prizi	1 ad.
6	60-013-000	Agss Gaz Prizi	1 ad.
7	99-515-001	Topraklı Elektrik Prizi	8 ad.
8	90-804-000	Topraklama nodu	8 ad.
9	90-300-510	Sehpa	1 ad.
10	90-300-535	Paslanmaz Çelik Ray	6 ad.
11	90-300-520	Çekmece	1 ad.



HTP-90

YATAY ÇİFT KOLLU PENDANT

Ürün Özellikleri

- HTP 90 Pendantları; ameliyathanelerde, yoğun bakımlarda ve doğum salonlarında anestezi ve cerrahi amaçlar için ihtiyaç duyulan tüm gerekli servisleri ve cihaz bağlantılarını tavandan sağlayan bir sistemdir.
- Pendantlar beyaz epoksi elektrostatik toz boyalıdır.
- Departmanın içerisinde hareketi kısıtlayan kablo ve bağlantılar yoktur.
- HTP 90 tipi pendant yatay iki kol ve konsoldan oluşmaktadır. Bu kol sayesinde konsolun ulaşabileceği mesafe artmaktadır.
- Pendant kol boyları 600 ve 800 mm'dir. Proje durumuna göre de bu ölçüler değişiklik gösterebilmektedir.
- Taşıyabileceği max. yük 150 kg'dır.
- Pendant kolu sabittir. Aşağı- yukarı hareket etmez.
- Tek, çift ve üç raflı konsol çeşitleri vardır.
- Çekmece opsiyoneldir.
- Konsol üzerinde bulunan monitör sehпасı max. 250 kg. yük taşıyabilme özelliğine sahiptir.
- Konsol kendi ekseninde 340° dönebilir.
- Konsol üzerinde Medikal Gaz Prizleri, AGSS elektrik servisleri, topraklama nodu bulunmaktadır.

Uygulanan Standartlar

- MDD 93/42/EEC EK-2, ISO 9001:2015, ISO 13485, ISO 14971, EN 15223-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN ISO 11197, EN 1041, EN 62366-1, HTM 02-01 standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün Modelleri


Tüketicinin talebine göre istenilen özelliklerde üretilmektedir.


HTP 90 Pendant	
Model	Özellik
90-307-102	Tek Sehpa
90-307-103	Tek Sehpa+ Çekmece
90-307-202	Çift Sehpa
90-307-203	Çift Sehpa + Çekmece

Ürün Renkleri


Tüketicinin talebine göre istenilen renklerde üretilmektedir.

	RAL 7035		RAL 7001
	RAL 3002		RAL 3014
	RAL 6019		RAL 9001
	RAL 5017		RAL 5018
	RAL 5024		Opsiyonel

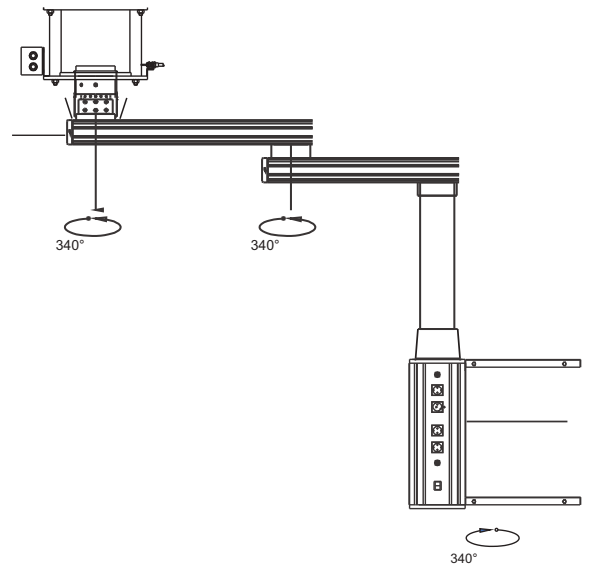

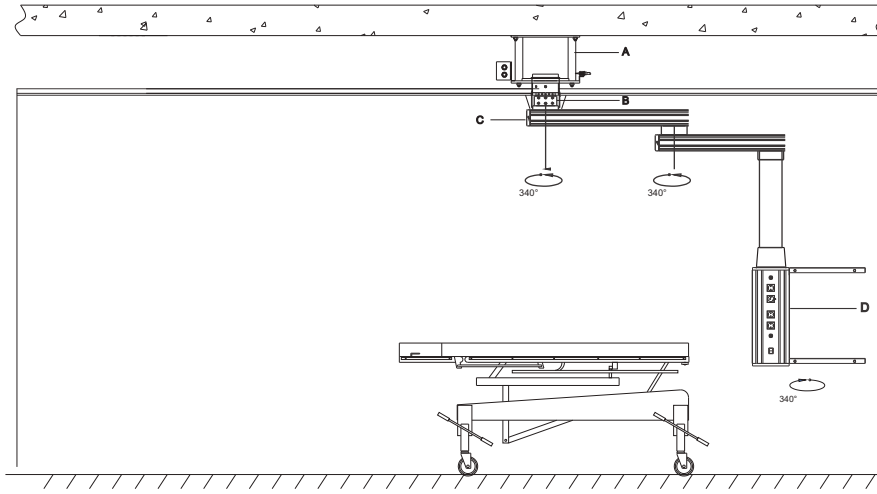


a

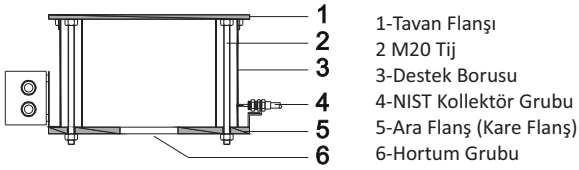


b





d

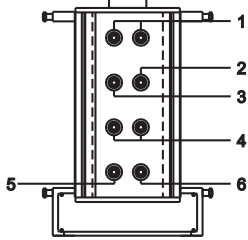

c

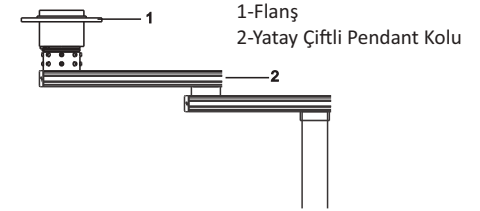

d. Konsol

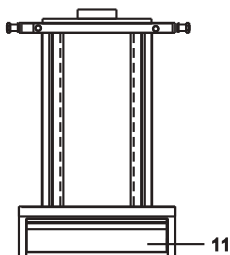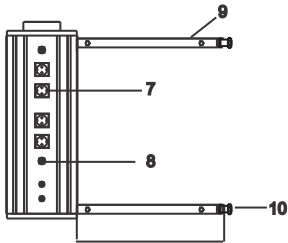

No	Ürün kodu	Ürün adı	Adet
1	10-010-020	Q-Click Oksijen Gaz Prizi	2 ad.
2	30-010-020	Q-Click Medikal Hava 4 Gaz Prizi	1 ad.
3	40-010-020	Q-Click Medikal Hava 7 Gaz Prizi	1 ad.
4	50-010-020	Q-Click Vakum Gaz Prizi	2 ad.
5	20-010-020	Q-Click Azot Protoksit Gaz Prizi	1 ad.
6	60-013-000	Agss Gaz Prizi	1 ad.
7	99-515-001	Topraklı Elektrik Prizi	8 ad.
8	90-804-000	Topraklama nodu	8 ad.
9	90-300-510	Sehpa	1 ad.
10	90-300-535	Paslanmaz Çelik Ray	6 ad.
11	90-300-520	Çekmece	1 ad.



MSP-90

MOTORLU TEK KOLLU PENDANT


Ürün Özellikleri

- MSP 90 Pendantları; ameliyathanelerde, yoğun bakımlarda ve doğum salonlarında anestezi ve cerrahi amaçlar için ihtiyaç duyulan tüm gerekli servisleri ve cihaz bağlantılarını tavandan sağlayan bir sistemdir.
- Pendantlar beyaz epoksi elektrostatik toz boyalıdır.
- Departmanın içerisinde hareketi kısıtlayan kablo ve bağlantılar yoktur.
- MSP 90 tipi pendantta 1 adet hareketli kol ve konsoldan oluşmaktadır. Pendant kol boyu 1000 mm dir. Proje durumuna göre pendant kol ölçüleri değişiklik gösterebilmektedir.
- Pendant kolu elektrik motoru sayesinde 65 cm aşağı-yukarı hareket edebilme özelliğine sahiptir.


- Tek, çift ve üç raflı konsol çeşitleri vardır.
- Çekmece opsiyoneldir.
- Konsol üzerinde bulunan monitör sehпасı min 90 kg. yük taşıyabilme özelliğine sahiptir.
- Konsol kendi ekseninde 340° dönebilir.
- Konsol üzerinde Medikal Gaz Prizleri, AGSS elektrik servisleri, topraklama nodu bulunmaktadır.

Uygulanan Standartlar

- MDD 93/42/EEC EK-2, ISO 9001:2015, ISO 13485, ISO 14971, EN 15223-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN ISO 11197, EN 1041, EN 62366-1, HTM 02-01 standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.

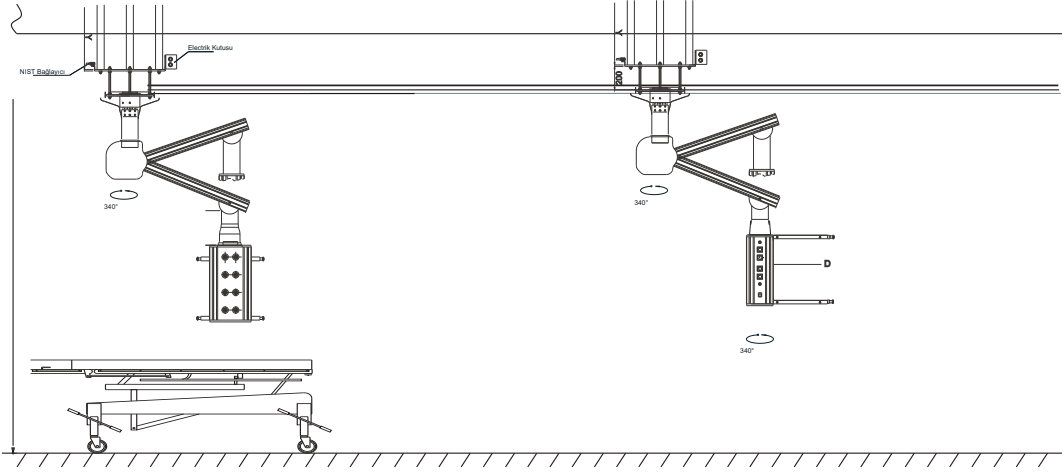

a

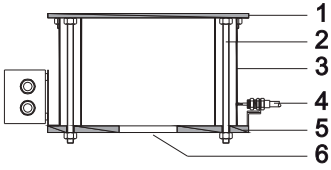


- 1-Tavan Flanşı
- 2 Vidalı Tij
- 3-Destek Borusu
- 4-NIST Bağlayıcı Grubu
- 5-Arayüz Flanşı
- 6-Hortum montaj yerleri

b







1-Kapak

c

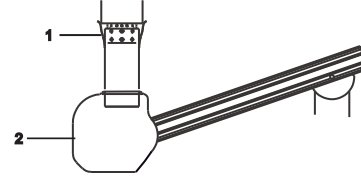

1-Flanş
2-Motorlu Tek Kol

d

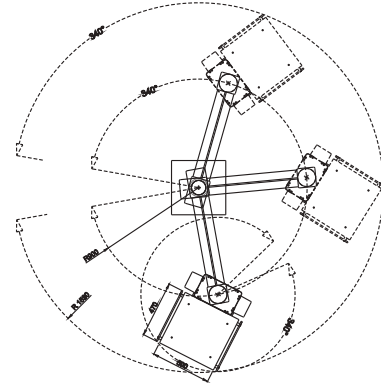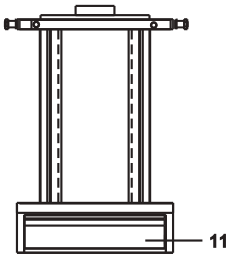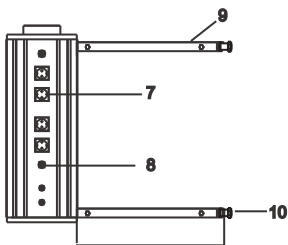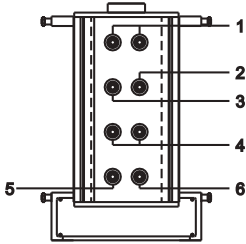

d. Konsol

NO	Ürün kodu	Ürün adı	Adet
1	10-010-Q	Q-Click Oksijen Gaz Prizi	2 ad.
2	30-010-Q	Q-Click Medikal Hava 4 Gaz Prizi	1 ad
3	40-010-Q	Q-Click Medikal Hava 7 Gaz Prizi	1 ad.
4	50-010-Q	Q-Click Vakum Gaz Prizi	2 ad
5	20-10-Q	Q-Click Azot Protoksit Gaz Prizi	1 ad.
6	60-013-000	Agss Gaz Prizi	1 ad.
7	99-515-003	UPS Elektrik Prizi	8 ad
8	99-519-003	Topraklama nodu	8 ad
9	90-300-103	Sehpa	1 ad.
10	90-300-104	Paslanmaz askı rayı	6 ad.
11	90-300-101	Çekmece	1 ad.



Ürün Modelleri


Tüketicinin talebine göre istenilen özelliklerde üretilmektedir.

MSP 90 Pendant	
Model	Özellik
90-303-102	Tek Sehpa
90-303-103	Tek Sehpa+ Çekmece
90-303-202	Çift Sehpa
90-303-203	Çift Sehpa + Çekmece

Ürün Renkleri

Tüketicinin talebine göre istenilen renklerde üretilmektedir.

	RAL 7035		RAL 7001
	RAL 3002		RAL 3014
	RAL 6019		RAL 9001
	RAL 5017		RAL 5018
	RAL 5024		Opsiyonel

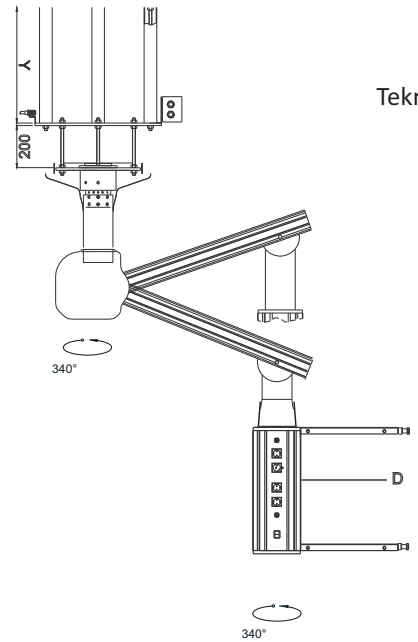

Teknik Çizim



MTP-90

MOTORLU ÇİFT KOLLU PENDANT

Ürün Özellikleri

- MTP 90 Pendantları; ameliyathanelerde, yoğun bakımlarda ve doğum salonlarında anestezi ve cerrahi amaçlar için ihtiyaç duyulan tüm gerekli servisleri ve cihaz bağlantılarını tavandan sağlayan bir sistemdir.
- Pendantlar beyaz epoksi elektrostatik toz boyalıdır.
- Departmanın içerisinde hareketi kısıtlayan kablo ve bağlantılar yoktur.
- MSP 90 tipi pendant 2 adet hareketli kol ve konsoldan oluşmaktadır. Bu kol sayesinde konsolun ulaşabileceği mesafe artmaktadır. Yatay kolun boyu 800 mm'dir. Proje durumuna göre pendant kol ölçüleri değişiklik gösterebilmektedir.
- Pendant kolu elektrik motoru sayesinde 65 cm aşağı-yukarı hareket edebilme özelliğine sahiptir.

- Tek, çift ve üç raflı konsol çeşitleri vardır.
- Çekmece opsiyoneldir.
- Konsol üzerinde bulunan monitör sehpası min 90 kg. yük taşıyabilme özelliğine sahiptir.
- Konsol kendi ekseninde 340° dönebilir. Konsol üzerinde Medikal Gaz Prizleri, AGSS elektrik servisleri, topraklama nodu bulunmaktadır.

Uygulanan Standartlar

- MDD 93/42/EEC EK-2, ISO 9001:2015, ISO 13485, ISO 14971, EN 15223-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN ISO 11197, EN 1041, EN 62366-1, HTM 02-01 standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir..



Ürün Modelleri


Tüketicinin talebine göre istenilen özelliklerde üretilmektedir.


MTP 90 Pendant	
Model	Özellik
90-304-102	Tek Sehpa
90-304-103	Tek Sehpa+ Çekmece
90-304-202	Çift Sehpa
90-304-203	Çift Sehpa + Çekmece

Ürün Renkleri


Tüketicinin talebine göre istenilen renklerde üretilmektedir.

	RAL 7035		RAL 7001
	RAL 3002		RAL 3014
	RAL 6019		RAL 9001
	RAL 5017		RAL 5018
	RAL 5024		Opsiyonel

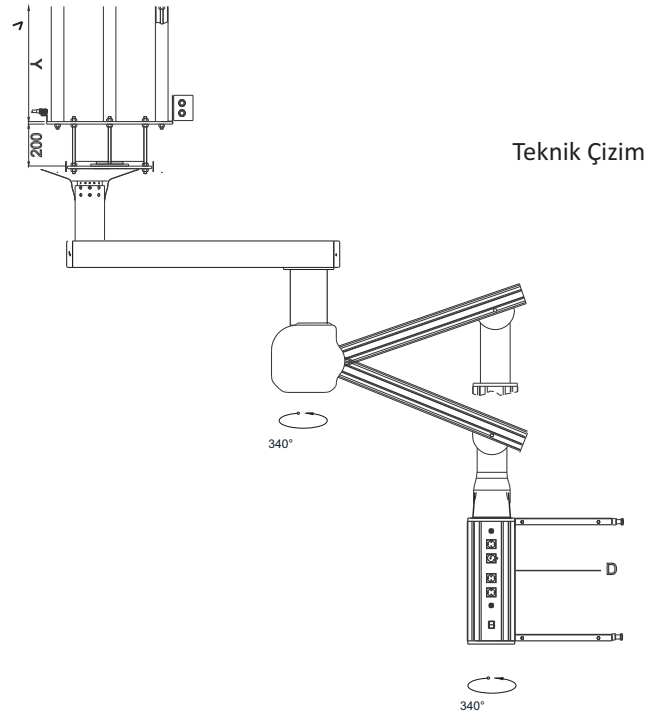


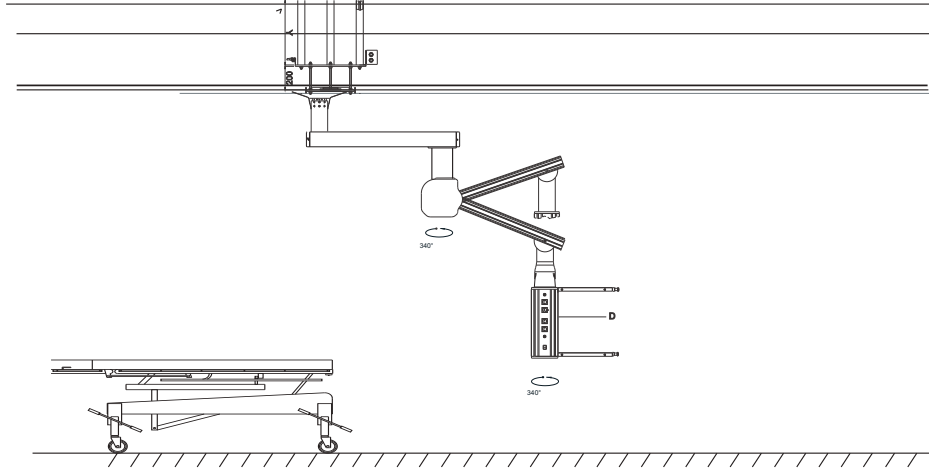




a

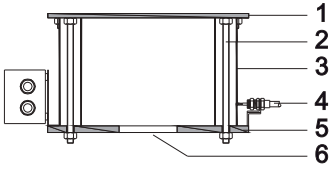


- 1-Tavan Flanşı
- 2 Vidalı Tij
- 3-Destek Borusu
- 4-NİST Bağlayıcı Grubu
- 5-Arayüz Flanşı
- 6-Hortum montaj yerleri

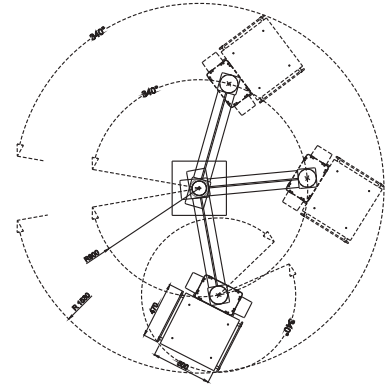


d

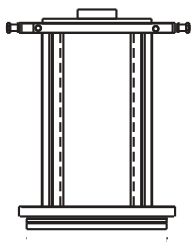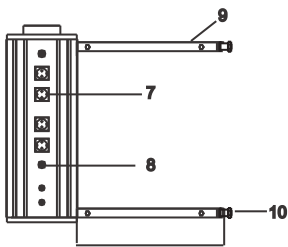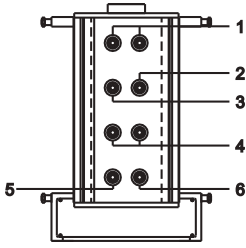

b

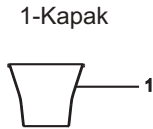

c

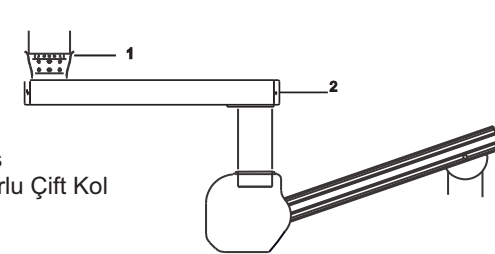

- 1-Flanş
- 2-Motorlu Çift Kol

d. Konsol

NO	Ürün kodu	Ürün adı	Adet
1	10-010-Q	Q-Click Oksijen Gaz Prizi	2 ad.
2	30-010-Q	Q-Click Medikal Hava 4 Gaz Prizi	1 ad
3	40-010-Q	Q-Click Medikal Hava 7 Gaz Prizi	1 ad.
4	50-010-Q	Q-Click Vakum Gaz Prizi	2 ad
5	20-10-Q	Q-Click Azot Protoksit Gaz Prizi	1 ad.
6	60-013-000	Agss Gaz Prizi	1 ad.
7	99-515-003	UPS Elektrik Prizi	8 ad
8	99-519-003	Topraklama nodu	8 ad
9	90-300-103	Sehpa	1 ad.
10	90-300-104	Paslanmaz askı rayı	6 ad.
11	90-300-101	Çekmece	1 ad.

DAP-90

ÇİFT KOLLU
AMELİYATHANE PENDANTI

Ürün Özellikleri

- DAP 90 Pendantları; ICU ve CCU odalarında anestezi ve cerrahi amaçlar için ihtiyaç duyulan tüm gerekli servisleri ve cihaz bağlantılarını tavandan sağlayan bir sistemdir.
- Elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
- İki kolludur ve tavana montelidir. Kollar pnömatrik fren sistemlidir.
- Islak ve kuru olmak üzere iki ayrı bölümü vardır. Islak bölümde infüzyon pompa tutucusu, serum askılığı, gaz ve elektrik servisleri bulunmaktadır.
- Kuru bölümde ise gaz ve elektrik servisleri monitör sehpası, cihaz taşıyıcı raf ve çekmece bulunmaktadır.

Ürün Modelleri

Tüketicinin talebine göre istenilen özelliklerde üretilmektedir.

DAP 90 Pendant	
Model	Özellik
90-305-200	Çift Kollu Ameliyathane Pendanti

- Kolonların hareketli ile ıslak ve kuru bölümlerinin yönleri yatağın konumuna göre değiştirilebilir.
- Ünite üzerindeki servisler ve aksesuarlar hastane talebine göre değişiklik gösterir.





Uygulanan Standartlar

- MDD 93/42/EEC EK-2, ISO 9001:2015, ISO 13485, ISO 14971, EN 15223-1, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN ISO 11197, EN 1041, EN 62366-1, HTM 02-01 standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün Renkleri

Tüketicinin talebine göre istenilen renklerde üretilmektedir.


	RAL 7035		RAL 7001
	RAL 3002		RAL 3014
	RAL 6019		RAL 9001
	RAL 5017		RAL 5018
	RAL 5024		Opsiyonel

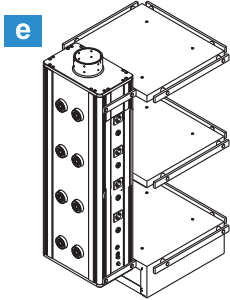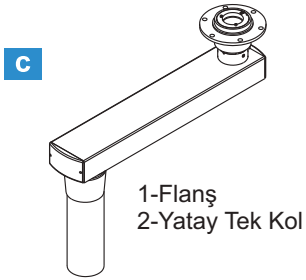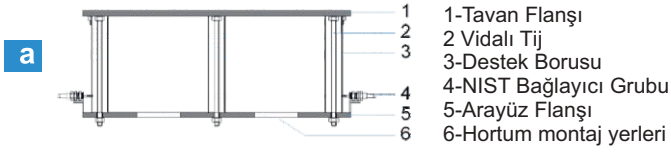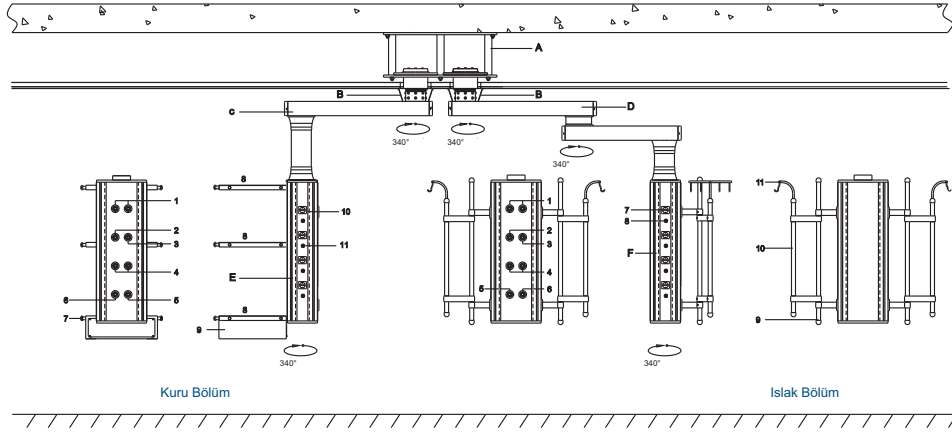

Kuru Bölüm

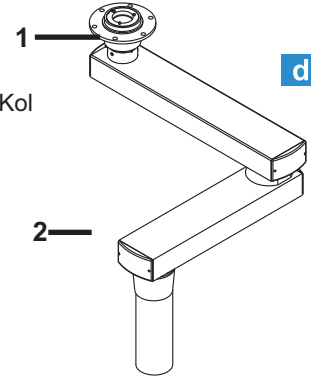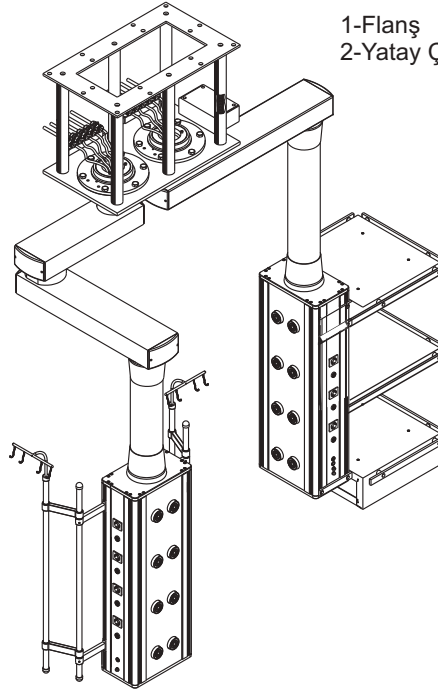

Islak Bölüm

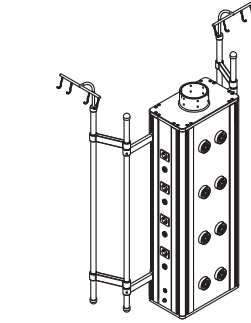


Kuru Bölüm Parçaları

No	Ürün Kodu	Ürün Adı	adet
1	10-010-Q	Q-Click Oksijen Gaz Prizi	2 ad.
2	30-010-Q	Q-Click Medikal Hava 4 Bar Gaz Prizi	1 ad.
3	40-010-Q	Q-Click Medikal Hava 7 Bar Gaz Prizi	1 ad.
4	50-010-Q	Q-Click Vakum Gaz Prizi	2 ad.
5	20-10-Q	Q-Click Azot Protoksit Gaz Prizi	1 ad.
6	60-013-000	Agss Prizi	1 ad.
7	90-300-104	U Tipi Ray	3 ad.
8	90-300-102	Sehpa	3 ad.
9	90-300-101	Çekmece	1 ad.
10	99-515-003	Topraklı Elektrik Prizi	8 ad.
11	99-519-003	Topraklama Nodu	8 ad.


Islak Bölüm Parçaları

NO	Ürün Kodu	Ürün Adı	Adet
1	10-010-Q	Q-Click Oksijen Gaz Prizi	2 ad.
2	30-010-Q	Q-Click Medikal Hava 4 Bar Gaz Prizi	1 ad.
3	40-010-Q	Q-Click Medikal Hava 7 Bar Gaz Prizi	1 ad.
4	50-010-Q	Q-Click Vakum Gaz Prizi	2 ad.
5	20-10-Q	Q-Click Azot Protoksit Gaz Prizi	1 ad.
6	60-013-000	Agss Prizi	1 ad.
7	90-300-104	Topraklı Elektrik Prizi	8 ad.
8	99-515-003	Topraklama Nodu	1ad.
9	90-300-106	İnfüzyon Pompa Tutucu	1 ad.
10	90-300-107	İnfüzyon Pompa Tutucu Destek Aparatı	1 ad.
11	90-300-108	4 Kancalı Serum Askısı	1 ad.



a) Konsol Ölçüsü : 500X350X210mm

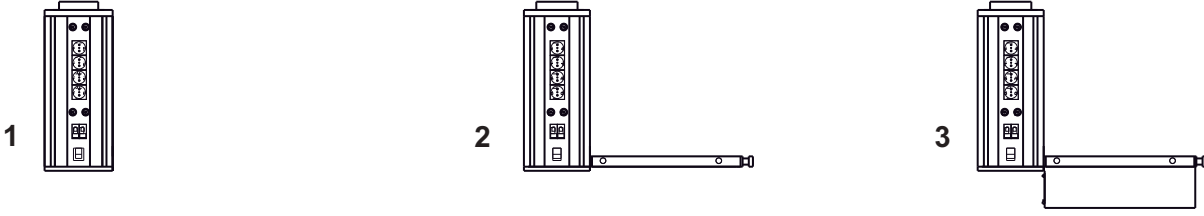

b) Konsol Ölçüsü : 650X350X210mm

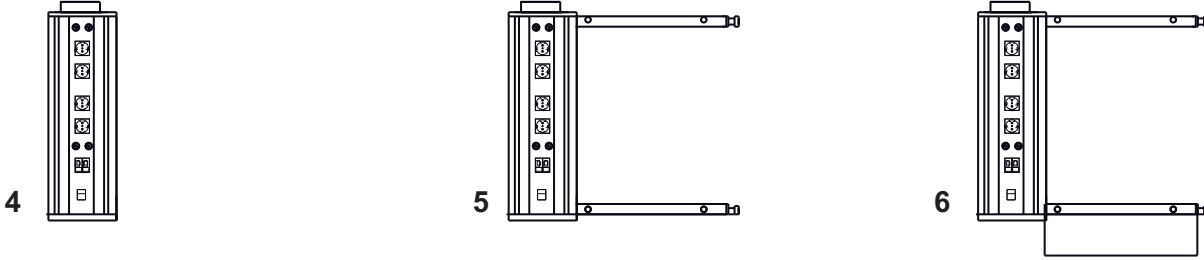


c) Konsol Ölçüsü : 1000X350X210mm

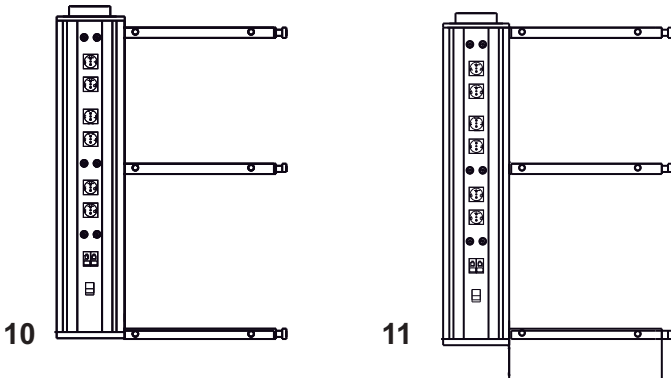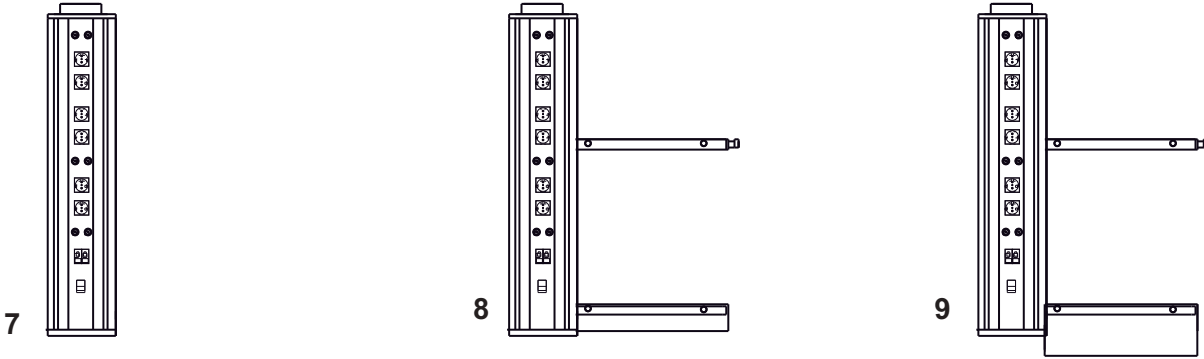

No	Ürün kodu	Ürün Adı
1	90-306-101	Pendant Konsolu
2	90-306-102	Tek Sehpalı Konsol
3	90-306-103	Tek Sehpalı, Çekmeceli Konsol
4	90-306-201	Pendant Konsolu
5	90-306-202	Çift Sehpalı Konsol
6	90-306-203	Çift Sehpalı, Çekmeceli Konsol
7	90-306-301	Pendant Konsolu
8	90-306-302	Çift Sehpalı Konsol
9	90-306-303	Çift Sehpalı,Çekmeceli Konsol
10	90-306-304	3 Sehpalı Konsol
11	90-306-305	3 Sehpalı, Çekmeceli Konsol

PENDANT KOLU MODELLERİ

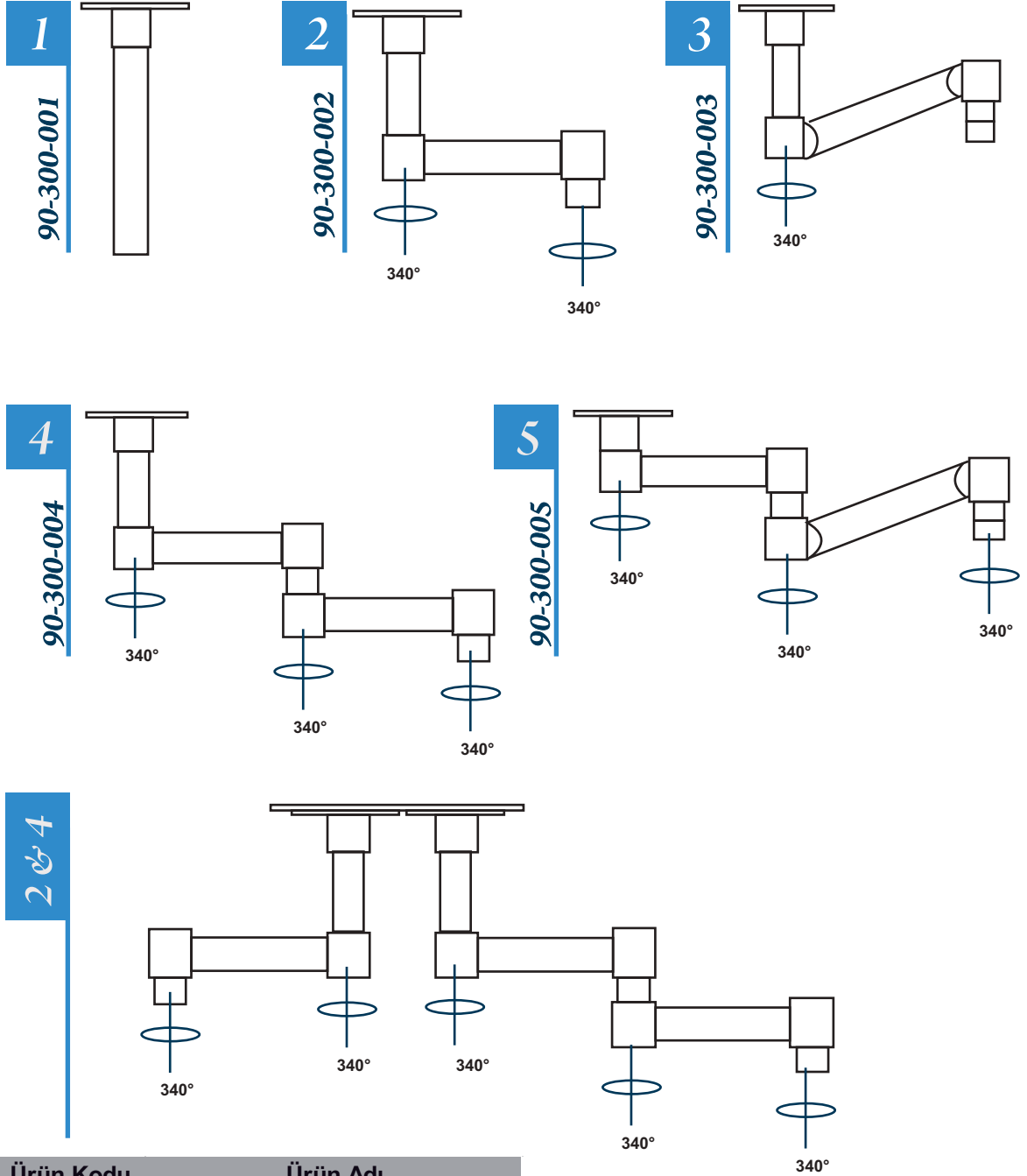

NO	Ürün Kodu	Ürün Adı
1	90-300-001	Sabit Pendant Kolu
2	90-300-002	Tekli Yatay Pendant Kolu
3	90-300-003	Motorlu Tekli Pendant Kolu
4	90-300-004	Tekli Yatay Pendant Kolu
5	90-300-005	Motorlu Çiftli Pendant Kolu

MEDİKAR HASTANE VE TIBBİ SİSTEMLER YAPI TAAHHÜT TESİSAT İMALAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Ofis: Varlık Mah. Beypazarı Cad. No:21/3 Yenimahalle/ANKARA Tel: +90 (312) 341 10 41 Fax: +90 (312) 341 10 42
 Fabrika: Mersin Tarsus OSB Cumhuriyet Bulvarı No:13 Akdeniz /MERSİN Tel: +90 (324) 645 40 41 Fax: +90 (324) 645 40 42



info@medikar.com



www.medikar.com