

HASTA YATAKBAŞI ÜNİTELERİ

Yatay Tip ve Pano Tipi Hasta Yatakbaşı Üniteleri

DUVAR MODÜLLERİ



MEDIKAR

www.medikar.com

info@medikar.com

HASTA YATAKBAŞI ÜNİTELERİ

Genel Tanım

Medikal gaz servisleri, ışıklandırma, telefon verisi veya Hemşire çağrı sistemi gibi hastanın ihtiyacı olan tüm gerekli faaliyetleri sağlayan ve boruları, kabloları saklamak için en mükemmel şekilde tasarlananan bir ünedir.

MEDİKAR Hasta Yatakbashi üniteleri elektrik (LV ve MV) ve gaz bölümleri tamamen birbirinden ayrılmıştır.

Yatakbashi ünitelerinin tüm kapakları vidasız çıtlama yöntemi ile takılıp çıkarılabilir olup ünite gövdesi montaj kızaklarına da yine çıtlama yöntemi ile takılır.



YATAY TİP HASTA YATAKBAŞI ÜNİTESİ

Uygulanan Standartlar

Hasta Yatakbashi Üniteleri MDD 93/42/EC, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971, EN 15223-1, EN 60601-1, EN ISO 11197, EN 1041, EN 62366-1, HTM 02-01 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Sistemin tüm elektrik tesisatı yürürlükteki IEE norm ve kurallarına uygun olarak yapılmıştır.

PANO TİPİ
HASTA YATAKBAŞI ÜNİTESİ



HASTA YATAKBAŞI ÜNİTELERİ

Fonksiyonel

Kullanım Kolaylığı

Estetik Görünüş

Dekoratif ve Özel Dizayn

Standartlara Uygunluk

HASTA YATAKBAŞI ÜNİTE MODELLERİ

DK 2014



MEDLINE



WALL TRUNK



ARTLINE



MEDLINE

Yatay Tip Hasta Yatakbaşı Ünitesi



 **MEDİKAR**



MEDLINE

Ürün Özellikleri

- Vidasız çıtlama kapak ile kolayca takılıp çıkarılabilir
- Elektrik (LV ve MV) ve Gaz bölümleri tamamen birbirinden ayrılmıştır.
- Ünite kapakları elektrostatik toz boyalı Alüminyum malzemeden yapılmıştır.
- Ünite üzerinde Medikal Gaz Prizleri, Hemşire çağrı, telefon ve elektrik prizleri bulunmaktadır.

YATAY TİP HASTA YATAKBAŞI ÜNİTESİ

- BS 5682, DIN 13260 veya EN 737-6 normlarına uygun basınç testinden geçirilmiş, içteki yağı temizlenmiş bakır borulu ve ana dağıtım şebekesine bağlantıya hazır Oksijen, Basıncılı Hava 4 Bar ve Vakum Prizleri.
- Işıklandırma üst bölümdeki dolaylı oda aydınlatması (1 x 18 W LED) veya alt bölümdeki okuma (1 x 9 W LED) için sağlanabilir. Her iki lamba da Yatakbaşı ünitelerine entegre edilmiştir ve kolayca çıkabilen prizmatik plastik ile kaplanmıştır.



Uygulanan Standartlar

- MDD 93/42/EC, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971, EN 15223-1, EN 60601-1, EN ISO 11197, EN 1041, EN 62366-1, HTM 02-01 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
- Sistemin tüm elektrik tesisatı yürürlükteki IEE norm ve kurallarına uygun olarak yapılmıştır.

Ürün Renkleri


- Tüketicinin talebine göre istenilen renklerde üretilmektedir.

	RAL 7035		RAL 7001
	RAL 3002		RAL 3014
	RAL 6019		RAL 9001
	RAL 5017		RAL 5018
	RAL 5024		Opsiyonel

Ürün Boyutları

- Yatakbashi üniteleri tüketicinin talebine veya ünitenin monte edileceği yerin genişliğine göre 100-120-150-160-180-200 cm veya odanın durumuna göre özel boyalarda üretimi yapılabilir.


MEDLINE Hasta Yatakbashi Ünitesi	
Model	Uzunluk
90-320-100	150cm
90-320-200	120 cm
90-320-300	150cm
90-320-400	160cm
90-320-500	180cm
90-320-600	200 cm

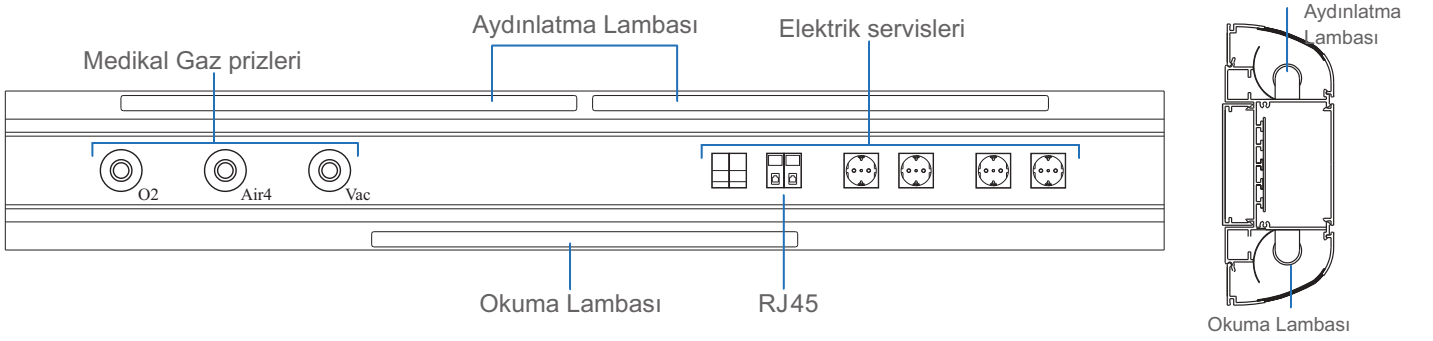

- 19 W Dolaylı Oda Aydınlatması
- 8 W Okuma Lambası
- Elektrik Servisleri
- Komütatör anahtar
- RJ 11 Telefon soketi
- DJ 45 Data soketi
- Hemşire çağrı provizyonu
- Medikal gaz prizleri

Işıklandırma

Model	Güç	Voltaj	Renk sıcaklığı	Lümen	Uzunluk
TB-001	9W	AC85-265V	6000-6700K	85-95lm/w	600
TB-002	18W	AC85-265V	6000-6700K	85-95lm/w	1200

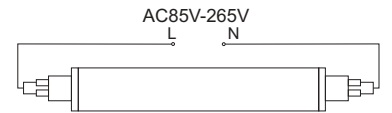


DK 2014

Yatay Raylı Tip Hasta Yatakbası Ünitesi






 **MEDIKAR**

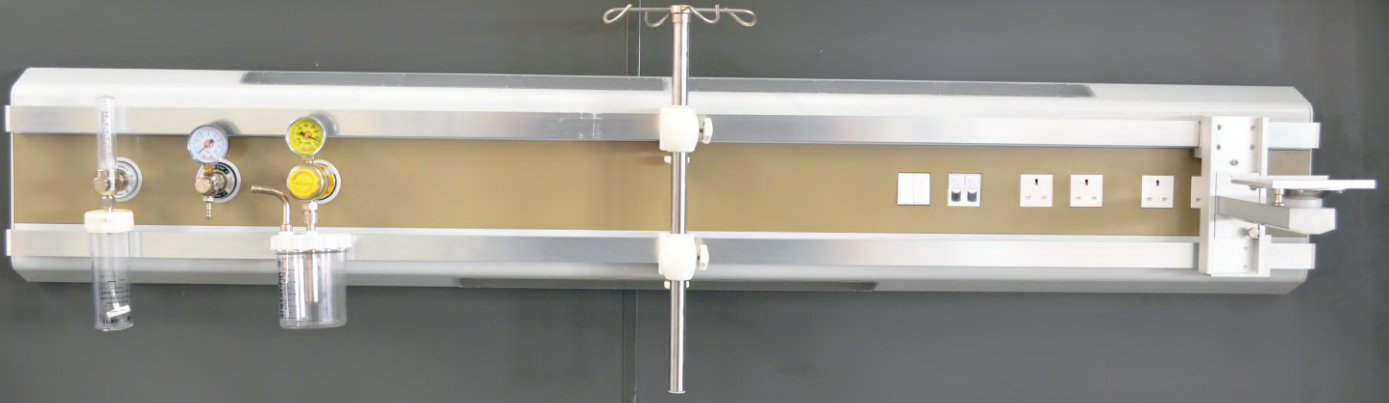**DK 2014****YATAY, RAYLI TİP
HASTA YATAKBAŞI ÜNİTESİ****Ürün Özellikleri**

- Vidasız cıtlama kapak ile kolayca takılıp çıkarılabilir
- Elektrik (LV ve MV) ve Gaz bölümleri tamamen birbirinden ayrılmıştır.
- Ünite kapakları elektrostatik toz boyalı Alüminyum malzemeden yapılmıştır.
- Ünite üzerinde Medikal Gaz Prizleri, Hemşire çağrı, telefon ve elektrik prizleri bulunmaktadır.
- Üniteler, elektrik prizleri, topraklama sistemi ve medikal gaz tesisatı yanında isteğe bağlı olarak aksesuar rayına monte edilebilen vakum kavanozu, infüzyon pompa taşıyıcı serum askısı, monitör sehpa ve muayene lambaları gibi aksesuarları bünyesinde bulundurmaktadır.
- BS 5682, DIN 13260 veya EN 737-6 normlarına uygun basınç testinden geçirilmiş, içteki yağı temizlenmiş bakır borulu ve ana dağıtım şebekesine bağlantıya hazır Oksijen, Basınçlı Hava 4 Bar ve Vakum Prizleri.
- Işıklandırma üst bölümdeki dolaylı oda aydınlatması (1 x 18 W LED) veya alt bölümdeki okuma (1 x 9 W LED) için sağlanabilir. Her iki lamba da Yatakbaşı ünitelerine entegre edilmiştir ve kolayca çıkabilen prizmatik plastik ile kaplanmıştır.

Uygulanan Standartlar

- MDD 93/42/EC, EN ISO 14971, ISO 9001, ISO 13485, EN 15223, EN 60601, ISO 11197, ISO 7396, ve HTM 02-01 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Sistemin tüm elektrik tesisatı yürürlükteki IEE norm ve kurallarına uygun olarak yapılmıştır.

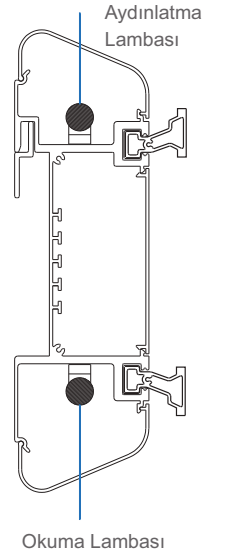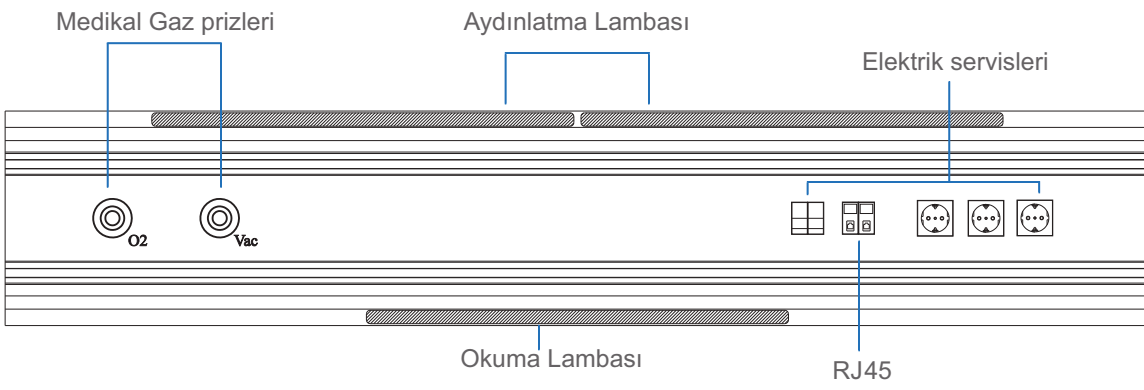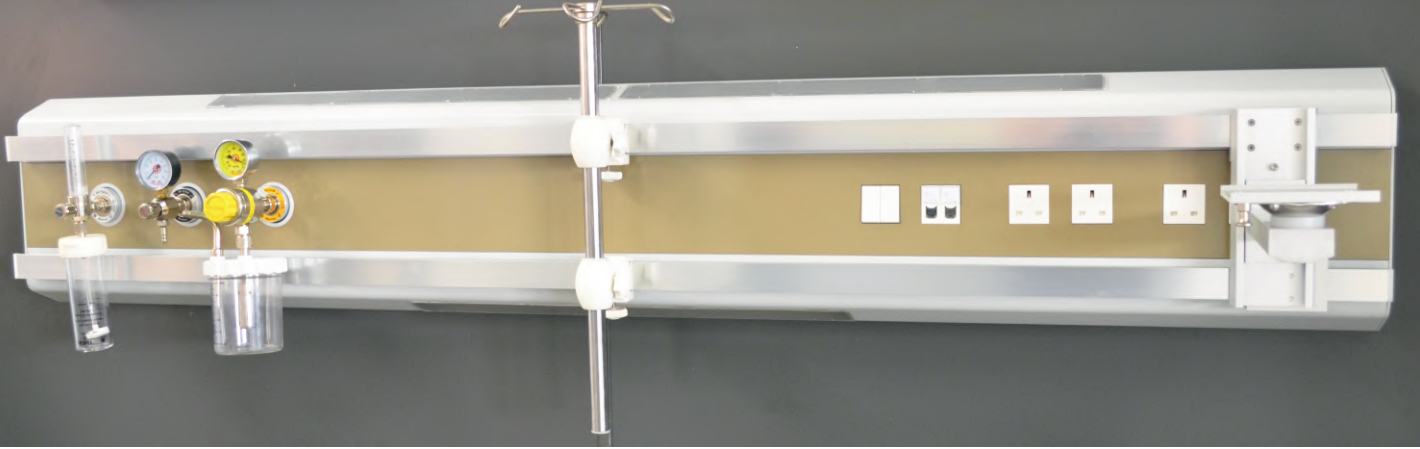

Ürün Boyutları

- Yatakbaşı üniteleri tüketicinin talebine veya ünitenin monte edileceği yerin genişliğine göre 100-120-150-160-180-200 cm veya odanın durumuna göre özel boylarda üretimi yapılabilir.

Ürün Renkleri

- Tüketicinin talebine göre istenilen renklerde üretilmektedir.

	RAL 7035		RAL 7001
	RAL 3002		RAL 3014
	RAL 6019		RAL 9001
	RAL 5017		RAL 5018
	RAL 5024		Opsiyonel





- 19 W Dolaylı Oda Aydınlatması
- 8 W Okuma Lambası
- Elektrik Servisleri
- Komütatör anahtar
- RJ 11 Telefon soketi
- DJ 45 Data soketi
- Hemşire çağrı provizyonu
- Medikal gaz prizleri
- İsteğe Bağlı Aksesuar Rayları

AC85V-265V
L N

Işıklıdırma

Model	Güç	Voltaj	Renk sıcaklığı	Lümen	Uzunluk
TB-001	9W	AC85-265V	6000-6700K	85-95lm/w	600
TB-002	18W	AC85-265V	6000-6700K	85-95lm/w	1200



DK 2014 Hasta Yatakbaşı Ünitesi	
Model	Uzunluk
90-750-100	100cm
90-750-120	120 cm
90-750-150	150cm
90-750-160	160cm
90-750-180	180cm
90-750-200	200 cm

ARTLINE

Pano Tipi Hasta Yatakbaşı Ünitesi



 **MEDIKAR**



ARTLINE

Ürün Özellikleri

- Hasta yatakbaşı ünitesi ön çerçeve ahşaptan iç gövde elektrostatik boyalı çelik malzemeden yapılmıştır.
- Ön yüzünde çift rayla çalışan resimli bir pano alt bölümde hemşire çağrı, telefon, ve elektrik prizleri bulunmaktadır.
- Panonun üst bölümünde yatakbaşı aydınlatması vardır.
- Rayla çalışan resimli pano kenara kaydırıldığında içerisinde Medikal gaz servisleri bulunan bölüm gözükcektir.

PANO TİPİ HASTA YATAKBAŞI ÜNİTESİ

- Pano tipi yatakbaşı duvarda sıva altı olarak monte edilip hastanın tüm gerekli faaliyetlerini sağlayan ve boruları, kabloları saklamak için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır.
- Sistemin tüm elektrik tesisatı yürürlükteki IEE norm ve kurallarına uygun olarak yapılmıştır.



Uygulanan Standartlar

- MDD 93/42/EC, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971, EN 15223-1, EN 60601-1, EN ISO 11197, EN 1041, EN 62366-1, HTM 02-01 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
- Sistemin tüm elektrik tesisatı yürürlükteki IEE norm ve kurallarına uygun olarak yapılmıştır.

Pano Tipi Hasta Yatakbaşı Ünitesi	
Ürün Kodu	Ürün Adı
90-360-000	ARTLINE



SIVA ÜSTÜ DUVAR MODÜLÜ

WALL TRUNK DUVAR MODÜLÜ

Ürün Özellikleri

- Duvar Müdülleri Ameliyathaneler, Acil Servis Bölümleri, Gözlem Odaları, Poliklinikler ve Röntgen odaları için tasarlanmıştır.
- Extrude Alüminyum profilden imal edilmiştir.
- Elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. RAL kataloğundan seçilen renge elektrostatik toz boya ile boyanır.
- Gövde üzerinde gaz prizleri ve isteğe bağlı olarak elektrik prizleri mevcuttur.



- Ameliyathanelerde pendant üzerindeki prizlerin arızalanması durumunda kullanılır.
- İhtiyaca göre Sıva üstü ve sıva altı modelleri mevcuttur.
- Ameliyathanelerin Hijyenik ortam olması nedeni ile sıva altı duvar modülleri kullanılır.
- Sıva üstü modeller ise Yatakbaşı ünitesine ihtiyaç olmayan Poliklinik, Radyoloji bölümleri gibi bölümler için kullanılmaktadır.

SIVA ÜSTÜ DUVAR MODÜLÜ



Ürün Modelleri

Tüketicinin talebine göre istenilen özelliklerde üretilmektedir.

SIVA ALTI DUVAR MODÜLÜ	
Model	Özellik
90-401-000	1 Gazlı, Siva Altı
90-402-000	2 Gazlı, Siva Altı
90-403-000	3 Gazlı, Siva Altı
90-404-000	4 Gazlı, Siva Altı
90-405-000	5 Gazlı, Siva Altı
90-406-000	6 Gazlı, Siva Altı


SIVA ÜSTÜ DUVAR MODÜLÜ	
Model	Özellik
90-425-000	1 Gazlı, Siva Üstü
90-426-000	2 Gazlı, Siva Üstü
90-427-000	3 Gazlı, Siva Üstü
90-428-000	4 Gazlı, Siva Üstü
90-429-000	5 Gazlı, Siva Üstü
90-430-000	6 Gazlı, Siva Üstü

Ürün Renkleri

Tüketicinin talebine göre istenilen renklerde üretilmektedir.

	RAL 7035		RAL 7001
	RAL 3002		RAL 3014
	RAL 6019		RAL 9001
	RAL 5017		RAL 5018
	RAL 5024		Opsiyonel

SIVA ALTI DUVAR MODÜLÜ

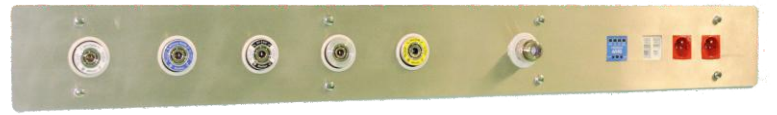

3 Gazlı Siva Üstü Duvar Modülü



5 Gazlı Siva Altı Duvar Modülü





CE 1984

Teknik Bilgiler

Elektrik

Şebeke Voltajı 110 / 240 V

Şebeke Frekansı 50 / 60 Hz

Nominal Akım 16 A (Devre başı)

Mekanik (Taşıma Kapasitesi)

Aksesuar Ray Max Ağırlık max. 50 kg.

Medikal Gaz Teknik Veriler

Uygun medikal gaz prizi standartları DIN, BS, AFNOR

Standartlar & Belgelendirme

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi,
- 93/42/EEC EK-2 Tıbbi Cihazlar Direktifi
- ISO 14971 Tıbbi Cihazlara Risk Yönetiminin Uygulanması
- EN 15223 Tıbbi Cihazlar-Tıbbi Cihaz Etiketlerinde, Etiketlemede ve Sunulacak Bilgide Kullanılacak Semboller
- EN 60601 Elektrikli Tıbbi Donanım
- TS EN ISO 11197 Tıbbi Ortamlar için Besleme Üniteleri
- ISO 7396 Tıbbi Gaz Boru Sistemleri
- HTM 02-01 Tıbbi Gaz Boru Sistemleri

MEDİKAR HASTANE VE TIBBİ SİSTEMLER YAPI TAAHHÜT TESİSAT İMALAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Ofis: Varlık Mah. Beypazarı Cad. No:21/3 Yenimahalle/ANKARA Tel: +90 (312) 341 10 41 Fax: +90 (312) 341 10 42
Fabrika: Mersin Tarsus OSB Cumhuriyet Bulvarı No:13 Akdeniz /MERSİN Tel: +90 (324) 645 40 41 Fax: +90 (324) 645 40 42



info@medikar.com



www.medikar.com